

Clearblue®

Hedelmällisyysmonitori
Advanced

Käyttöohje



Sisällysluettelo

Osa 1 Johdanto	02
Osa 2 Yleistä	07
Osa 3 Aloittaminen	08
Osa 4 Monitorin käyttö	09
Osa 5 Hedelmällisyyden ja raskauden testaaminen	12
• Hedelmällisyyden testaaminen	12
• Raskauden testaaminen	17
Osa 6 Kalenteri ja kierron tiivistelmä	20
Osa 7 Muut tiedot	23
Osa 8 Ongelmien ratkaisu ja kysymyksiin vastaaminen	25

Osa 1

Johdanto

Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori auttaa tunnistamaan ne päivät kierrosta, jolloin on suurin mahdollisuus tulla raskaaksi. Sen avulla voi tehdä myös raskaustestin.

Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori koostuu kosketusnäytöstä sekä hedelmällisyys- ja raskaustesteistä. Monitorin mukana toimitetaan kaksi paristoa (AA-alkaliparistot (LR6) 1,5 V). Testit myydään erikseen. Tarvitset 10 hedelmällisyystestiä jokaisessa kierrossa, mutta saatat tarvita 20 testiä, jos kiertosi on pitkä tai epäsäännöllinen. Tämän monitorin kanssa voi käyttää vain Clearblue Advanced -hedelmällisyystestiä.

Sopiiko Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori minulle?

Monitori sopii naisille, joiden kierto kestää normaalisti 21–42 päivää. Jos kiertosi on aina lyhyempi kuin 23 päivää tai aina pitempi kuin 37 päivää, monitori ei ehkä havaitse LH-huippua. Saat kiertosi pituuden selville merkitsemällä kuukautisten alkamispäivän (ensimmäisen täyden vuotopäivän) päiväksi 1. Kierron pituus on päivien kokonaismäärä päivästä 1 seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.

Tietyt terveydentilat ja lääkkeet voivat vääristää hedelmällisyystestin tuloksia. Voit saada virheellisen tuloksen, jos

- sinulla on vaihdevuosisioireita, kuten yöhikoilua tai kuumia aaltoja
- sinulla on munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS)
- sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa
- olet raskaana tai olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti)
- käytät hormonivalmisteita, kuten hormonaalista ehkäisyä, saat hedelmällisyyshoitoja tai hormonikorvaushoitoa
- saat mitä tahansa muuta hoitoa, joka saattaa vaikuttaa kiertoosi
- olet tetrasykliinejä sisältävällä antibioottikuurilla. Kun hoito on ohi, voit alkaa käyttää Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria seuraavan kierron alusta.

Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

Odota kahden peräkkäisen normaalin kierron ajan (molemmat 23–37 päivää), jos olet hiljattain

- imettänyt
- käyttänyt hormonaalista ehkäisyä tai hormonivalmisteita
- saanut mitä tahansa muuta hoitoa, joka saattaa vaikuttaa kiertoosi
- ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti).

Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitorin käyttämistä.


Jotkin lääkkeet ovat vasta-aiheisia raskauden aikana. Ole yhteydessä lääkäriin mahdollisesta lääkityksestäsi, ennen kuin yrität raskautta. Jos sinulla on lääkärin diagnosoimia hedelmällisyysongelmia, kysy lääkäriltäsi, soveltuuko Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori sinulle.

Jos käytät monitoria raskaustestiin, tietyt lääkkeet ja sairaudet saattavat vaikuttaa tulokseen. Katso kysymys 24.


Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria Ei saa käyttää ehkäisymenetelmänä.

Kuinka monitori toimii?


Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori tunnistaa muutokset kahden tärkeimmän hedelmällisyshormonin, eli LH-hormonin ja estrogeenin, pitoisuudessa virtsassa. Se tunnistaa nämä muutokset yksinkertaisilla virtsatesteillä.

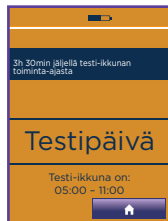


Monitori pyytää testiä tiettyinä päivinä kierron aikana.

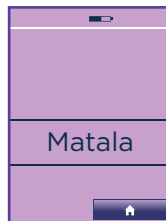

Testi näyttää heikkoa hedelmällisyyttä päivinä, jolloin raskaaksi tuleminen on epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta.

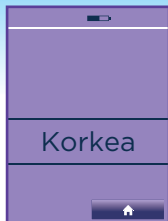

Estrogeenitaso nousee päivinä ennen LH-huippua ja auttaa kehoa valmistautumaan ovulaatioon. Estrogeenitason nousun tunnistaminen osoittaa, että hedelmällisyys on korkealla, ja se näkyy monitorissa korkeana.

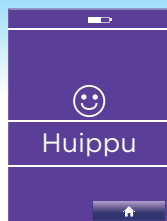

LH-huippu tapahtuu noin 24-36 tuntia ennen munasolun irtoamista munasarjasta (tätä kutsutaan ovulaatioksi). LH-huipun havaitseminen osoittaa, että olet hedelmällisimmilläsi, ja se näkyy monitorissa huippuna.

Yhdyntä korkean ja huippuhedelmällisyyden päivinä maksimoi mahdollisuutesi tulla raskaaksi.




Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori testaa raskauden tunnistamalla raskaushormonin eli hCG:n virtsasta.



Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitorin kalenteriin voit kirjata hyödyllisiä tietoja, kuten yhdyntöjen ajankohdat.

Monitorin toiminta lyhyesti

Kerromme tässä yksinkertaistettuna, kuinka monitori toimii. Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen käyttöä.

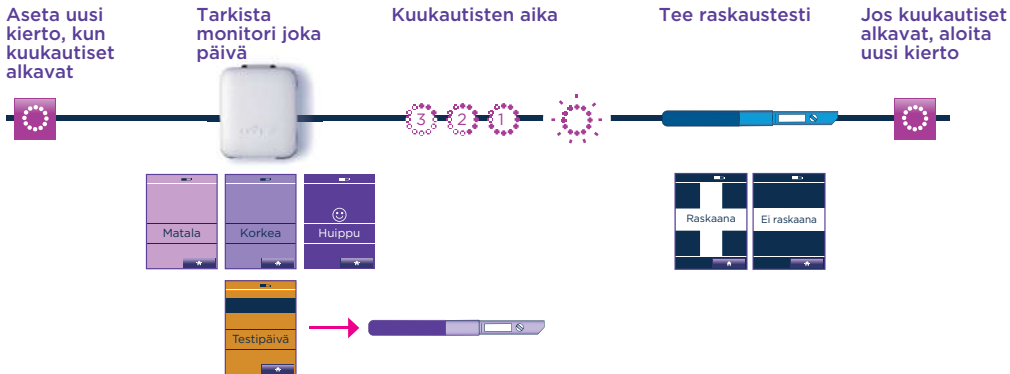

Kuinka tarkka Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori on?

Laboratoriotestit ovat osoittaneet, että Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori tunnistaa 99 prosentin tarkkuudella LH-huipun kierrossa, jossa LH-huippu on esiintynyt.

Laboratoriotestit ovat osoittaneet, että Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori havaitsee raskauden 99 prosentin tarkkuudella sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa.



Kansi

Kosketusnäyttö

Näyttö himmenee automaattisesti 30 sekunnin kuluttua ja sammuu kokonaan 1 minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä.

Käytä kosketusnäyttöä sormella, älä terävillä esineillä.

On/Off-painike

Testivalo

Testiaukko

Kierron päivä ja
hedelmällisyystilanne tai
testipäivän tiedot
Tietopalkki

Aseta uusi kierto ja
kierron tiedot

Kalenteri
Tallenna ja tarkastele
tietoja

Päivämäärä
tänäänPariston
varaustila

Hälytys


Aika

Aseta hälytys


Muuta
asetuksia



Aseta paristot

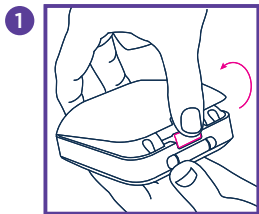

1 Irrota paristopesän kansi painamalla kannen vapautuspainiketta.

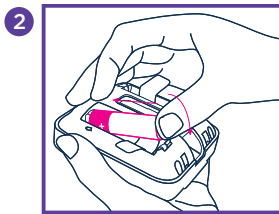

2 Työnnä ensin pariston positiivinen pää

paikoilleen ja aseta paristo paristoliuskan päälle. (Liuskat toimivat apuna paristojen poistamisessa.) Kohdista pariston +-pää paristolokerossa näkyvään +-merkkiin ja työnnä negatiivinen pää alas. Kun kumpikin paristo on paikoillaan, aseta kansi.

Lisätietoa paristoista ja niiden vaihdosta saa sivulta 24.

Monitorin asetus

Kytke monitori päälle ja noudata näytön ohjeita:

- 1 Aseta kieli.
- 2 Kalibroi näyttö.
- 3 Valitse tämän päivän päivämäärä.
- 4 Valitse ajan esitysmuoto ja aseta aika.
- 5 Aseta PIN-koodi (valinnainen). Jos PIN on asetettu, sinua pyydetään syöttämään se joka kerran, kun monitori kytketään päälle.

Yllä olevat asetukset voi muuttaa Asetukset-valikosta päivämäärää lukuun ottamatta. Asetettua päivämäärää ei saa muuttaa. Jos muutat päivämäärää, monitori on ohjelmoitava uudelleen (katso sivu 23).

Sinun on asetettava uusi kierto aina kun seuraava kierto alkaa. Aseta kierto päivien 1 - 4 välillä, jossa päivä 1 on kuukautisten ensimmäinen päivä – ensimmäinen vuotopäivä – tiputtelua ei lasketa. Jos kiertoa ei aseteta kuukautisten 4 ensimmäisen päivän aikana, sinun on odotettava seuraavaan kiertoon, jotta voit käyttää monitoria.

1 Paina 🏠 > 🇪🇺 > 🇪🇺

2 Syötä päivä, jolloin kuukautiset alkoivat.

3 Syötä aika, jolloin kuukautiset alkoivat.

Jos et muista, koska kuukautiset alkoivat tai ne alkoivat yöllä, syötä se aika, jolloin normaalisti heräät. On tärkeää yrittää muistella, mihin aikaan kuukautiset alkoivat, koska monitori määrittelee kierron ensimmäisen päivän tämän tiedon perusteella.

4 Aseta testi-ikkuna.

Testi-ikkuna on se 6 tunnin jakso, jonka kuluessa testin voi tehdä. Katso lisätietoja sivulta 10.

5 Paina 🏠 asetusten loppuun saattamiseksi.

6 Monitori näyttää kuukautiskierron päivän ja onko kyseessä matala, korkea vai huippu.

Lisätietoa kierron asetuksesta

-  tulee näkyviin osoittamaan, että uusi kierto alkaa testi-ikkunan alussa. Päivä 1 saattaa näkyä vasta kuukautisten alkamista seuraavana päivänä.
- Kun asetat uuden kierron ja jos aiempi kierto oli alle 21 tai yli 42 päivää, monitori näyttää viestin ja antaa toimintaohjeet (lue kysymys 1).

Muuta kierron asetuksia

Voit muuttaa tai poistaa kierron asetuksen vain päivien 1 - 4 välillä.

- Paina  >  >  Vaihda


Lue kohta Uuden kierron asetus ja noudata annettuja vaihteita.

Poista kierron asetukset

- Paina  >  >  Poista

Monitori siirtyy takaisin edellisen kierron asetuksiin.

Lisätietoa testi-ikkunasta

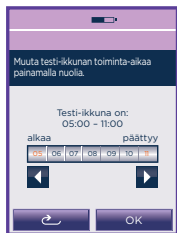

- Sinun **pitää** tarkistaa monitori joka päivä testi-ikkunan aikana, jotta näet, onko testi tehtävä.
- Voit asettaa testi-ikkunaksi mitkä tahansa 6 tuntia 24 tunnin aikana, mutta sen on oltava aikana, jolloin voit testata päivän ensimmäisestä virtsanäytteestä heti herättyäsi, sillä silloin hormonipitoisuus on suurimmillaan.
- Ensimmäisessä kierrossa monitori asettaa automaattisesti testi-ikkunaksi 05.00 - 11.00. Voit muuttaa tätä asetusta nuolinäppäimillä ja painamalla OK.

- Monitori asettaa jokaisen perättäisen kierron alussa testi-ikkunan samalle ajalle kuin edellisessä kierrossa.
- Painamalla  >  tarkistetaan, milloin testi-ikkuna on asetettu.
- Testi-ikkunaa voi muuttaa päivien 1-4 välillä. Testi-ikkunaa muutetaan noudattamalla ohjeita kierron asetuksen muutoksesta. Katso sivu 10.

Aseta hälytys

Saatat haluta asettaa hälytyksen muistuttamaan sinua, koska on aika tehdä testi. Sen voi tehdä heti uuden kierron asetuksen jälkeen. Jos poistat tai muutat kiertoa ensimmäisen käyttökierron aikana, hälytys poistetaan ja se on asetettava uudelleen. Hälytys on aktiivinen vain testipäivinä, ja se voidaan asettaa vain testi-ikkunan aikana.

- 1 Paina  >  > ON
- 2 Syötä aika ja paina OK

 tulee tietopalkkiin vahvistamaan hälytyksen asetuksen.

Varmista, että käytät oikeaa testiä sen mukaan, teetkö hedelmällisyys- vai raskaustestiä. Hedelmällisyystestit ovat violetinvärisessä suojakääreessä, ja testit ovat violetti-valkoisia. Tämän monitorin kanssa on käytettävä ainoastaan Clearblue Advanced -hedelmällisyystestejä ja -raskaustestejä. Kun testipuikko on työnnetty paikalleen, monitori määrittelee, onko kyseessä hedelmällisyystesti vai raskaustesti, ja lukee tuloksen automaattisesti.



Hedelmällisyystesti




Raskaustesti

Hedelmällisyyden testaaminen

On tärkeää, että teet kaikki hedelmällisyystestit monitorin ohjeiden mukaan. Jos joku testeistä jää väliin, monitori käyttää sille jo tallennettua tietoa hedelmällisyyden tilan määrittämiseksi, ja huippupäivien tunnistaminen saattaa epäonnistua. Jos testi jää väliin, saat siitä tiedon tietopalkkiin seuraavan kerran, kun kytket monitorin päälle. Tyhjennä viesti painamalla OK.

Kun olet asettanut uuden kierron, kalenteri näyttää päivät, jolloin testi on tehtävä.

1

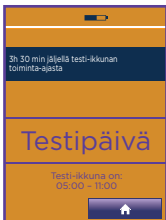

Tarkista, pyytääkö monitori testiä. Testivalo vilkkuu ja testipäivänäyttö tulee näkyviin. Voit asettaa testin testilaitteeseen, kun näytössä näkyy mikä tahansa muu näyttö kuin Clearblue- tai virhenäyttö.

2


Kun olet valmiina testiin, valitse oikea testi. Hedelmällisyystestit ovat violetinvärisessä suojakääreessä.



- 3 Avaa suojakääre, ota testipuikko ulos ja käytä se heti.



Älä pidä testiä näytteenottopää ylöspäin suunnattuna, sillä se saattaa vaikuttaa tulokseen.

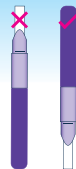

- 4 Valitse testaustapa:

Virtsasuihkussa

Pidä näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna virtsasuihkun alla **vain 3 sekunnin** ajan.




TAI

Kastaminen


Kerää virtsanäyte puhtaaseen ja kuivaan astiaan ja kasta pelkkä testipuikon näytteenottopää virtsaan **vain 15 sekunniksi**, kuten kuvassa esitetään.



- 5 Poista suojus.

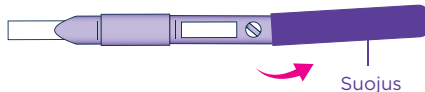


- 6 Aseta suojus näytteenottopäähän. Pyyhi ylimääräinen virtsa pois.

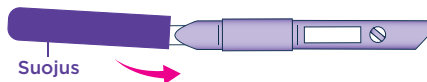


- 7 Työnnä testi monitoriin välittömästi. Jos monitori on pois päältä, käynnistä se uudelleen ja **odota, että Clearblue-näyttö katoaa ennen testin työntämistä monitoriin.**

- 8 Etsi testiaukko.


Testiaukko

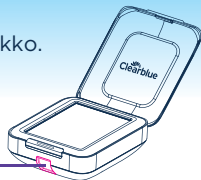


- 10 Aseta testi monitoriin siten, että leikattu kulma osoittaa testin alareunaa kohti ja testin värillinen sivu on testiaukon oikealla puolella.

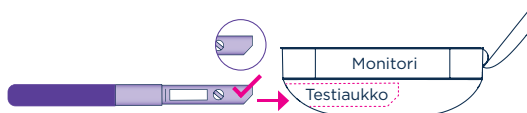

- 11 Työnnä testiä, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen.

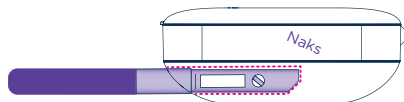

- 9 Pidä monitoria vaakatasossa tai aseta se tasaiselle alustalle.

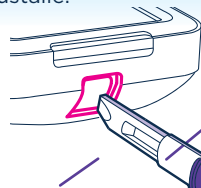

Leikattu kulma on alaspäin

Tarkista, että testin värillinen sivu on testiaukon oikealla puolella

ÄLÄ TEE NÄIN


Älä työnnä näytteenottopäätä monitoriin.



Älä aseta niin, että leikattu kulma osoittaa ylöspäin.



Älä työnnä suojusta monitoriin.

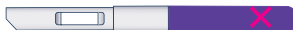

- 12 Monitori varmistaa, että testi on paikallaan oikein ja tunnistaa, onko kyseessä raskaus- vai hedelmällisyystesti.



Kun prosessi on valmis, esiin tulee laskentanäyttö. Testattaessa hedelmällisyyttä tämä näyttö osoittaa myös, mitä hormonia etsitään, kunnes se havaitsee LH-huipun.

Älä poista testipuikkoa laskennan aikana. Jos testipuikko poistetaan liian aikaisin, näytölle tulee virheilmoitus. Katso sivu 25.


Näyttö sammuu 1 minuutin kuluttua, mutta monitori jatkaa testin analysointia. Testivalo vilkkuu.

- 13 Odota tulosta viisi minuuttia.
- 14 Jos monitori käynnistetään uudelleen, näytölle tulee odotusaika. Hälytysääni kuuluu, kun testi on valmis, ja valo lakkaa vilkkumasta.
- 15 Jos monitori on pois päältä, kytke se takaisin päälle ja poista testi.
- 16 Lue tulos. Tulokset on luettava monitorin näytöstä, ei testipuikossa mahdollisesti näkyvistä viivoista.
- 17 Hävitä testi normaalin kotitalousjätteen mukana. Testiä ei saa käyttää uudelleen.


Lisätietoa hedelmällisyystestin tekemisestä

- Kun teet hedelmällisyystestiä, varmista, että käyttämiesi 10 testin eränumero on sama. Eränumero (LOT) on merkitty testipuikon suojakääreeseen tai testin pakkauslaatikkoon (hedelmällisyystestin eränumero alkaa kirjaimilla FT, esim. FT0001). Jos monitori pyytää 10 testin jälkeen tekemään vielä toiset 10 testiä saman kierron aikana, voit käyttää eri erää, kunhan seuraavat 10 testiä ovat samasta erästä.
- Älä käytä testipuikkoa, jos sen viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen tai pakkaus on vaurioitunut. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty suojakääreeseen ja pakkaukseen.
- Jos haluat ottaa virtsaa varastoon testin tekemiseksi myöhemmin, esimerkiksi jos sinun pitää käydä vessassa ennen testi-ikkunan alkamista, käytä puhdasta ja kuivaa astiaa ja säilytä näytettä huoneenlämmössä ennen testin tekemistä. Muista tehdä testi testi-ikkunan aikana.

Lisätietoa hedelmällisyystestin tuloksista

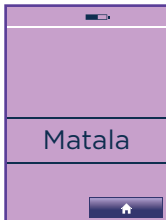


Matala tarkoittaa, että raskaaksi tuleminen on epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta, jos yhdynnässä ollaan tänään.

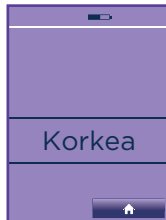

Korkea tarkoittaa, että mahdollisuudet tulla raskaaksi ovat lisääntyneet, jos yhdynnässä ollaan tänään. Se näkyy ensin, kun monitori tunnistaa estrogeenitason kohonneen. Arvo näkyy korkeana, kunnes monitori tunnistaa LH-huipun. Arvo näkyy korkeana myös 2 huippupäivän jälkeisenä päivänä.

Jos korkeita päiviä on yli 10 tai enemmän kuin olisit odottanut, katso kysymys 6.

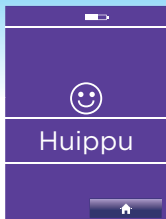

Huippu tarkoittaa, että hedelmällisin aika on saavutettu, ja se tulee näkyviin näyttöön, kun monitori havaitsee LH-huipun 24–36 tuntia ennen ovulaatiota. Monitori näyttää huippuarvon kahtena peräkkäisenä päivänä.

Maksimoi mahdollisuutesi tulla raskaaksi olemalla yhdynnässä korkean ja huippuhedelmällisyyden päivinä.

Kierroissa on eroja naisten välillä, ja myös saman naisen eri kierroissa on vaihtelua. Se tarkoittaa, että korkeiden päivien määrä voi vaihdella myös niiden esiintyessä kierron aikana. Huippupäivien ajoitus voi vaihdella, mutta ne ovat aina 2 peräkkäisenä päivänä.

Raskauden testaaminen

Kun käytät monitoria ensimmäisen kerran, sinun on asetettava uusi kierto ennen raskaustestin tekemistä. Voit tehdä testin kerran testi-ikkunan aikana, mutta jos saat virheilmoituksen, tarvitset uuden testin.

- 1 Testi on tehtävä testi-ikkunan aikana.

Tarkista testi-ikkuna painamalla  > 

- 2 Valitse oikea testi. Raskaustestit ovat valkoisessa suojakääreessä.




- 3 Noudata hedelmällisyystestin ohjeita vaiheesta 3.

- 4 Huomaa, että raskaustestissä on sininen sivu ja sininen suojus ja että tulosten näkyminen vie 5 minuuttia.

Katso lisätietoa sivulta 18 ennen raskaustestin tekemistä.

Lisätietoa raskaustestin tekemisestä

- Monitori arvioi kuukautisten oletetun alkamispäivän käyttämällä huippupäivien ajoitusta ja edellisen kierron tietoja. Jos monitorilla ei ole tietoja käytettäväksi, se käyttää oletuksena 28 päivän kiertoa.
- Kierrot vaihtelevat, ja nämä aikamäärät ovat vain ohjeellisia.
- Symboli kertoo päivien määrän kuukautisten oletettuun alkamispäivään.
- Päivänä, jolloin kuukautisten pitäisi alkaa, symboli ei näytä numeroa, vaan se alkaa vilkkua.

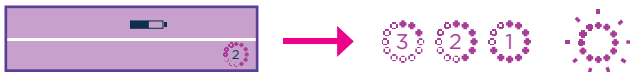

- Monitori havaitsee raskauden yli 99 prosentilla tarkkuudella sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa.
- Clearblue suosittelee tekemään testin sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa. Raskaushormonin määrä kasvaa kuitenkin nopeasti raskauden varhaisvaiheessa, joten Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria voidaan käyttää raskauden testaamiseen jo 3 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää. Kliinisissä testeissä Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori antoi varhaisraskauden aikana otetuista näytteistä seuraavat tulokset:

Päiviä kuukautisten oletettuun alkamiseen	Näytteiden prosenttiosuus raskaana olevista naisista, jotka saavat Raskaana-tuloksen
-1	96 %
-2	91 %
-3	74 %

- Älä käytä testipaukkoa, jos sen viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen tai pakkaus on vaurioitunut. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty suojakääreeseen.
- Jos haluat ottaa virtsaa varastoon testin tekemiseksi myöhemmin, esimerkiksi jos sinun pitää käydä vessassa ennen testi-ikkunan alkamista, käytä puhdasta ja kuivaa astiaa ja säilytä näytettä huoneenlämmössä ennen testin tekemistä. Muista tehdä testi testi-ikkunan aikana.

Lisätietoa raskaustestin tuloksista



- Testituloksen mukaan olet raskaana, käy lääkärissä lisäohjeiden saamiseksi.



- Tuloksesi on Ei raskaana. On mahdollista, että et ole raskaana, tai jos teit testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, on mahdollista, että raskaushormonin pitoisuus ei ole riittävän suuri, jotta testi pystyisi havaitsemaan sen. Tee uusi testi sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa.
- Jos teet testin sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa ja saat yhä tuloksen Ei raskaana, voit tehdä uuden testin 3 päivän kuluessa. Jos tämänkin testin tulos on Ei raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

Kalenteri

Kalenterin muistiin tallentuvat tiedot nykyisestä ja aiemmista 6 kierrosta. Vanhemmat kiertotiedot korvataan uusilla.

- 1 Pääset tietoihin painamalla  > 

Pääset tietoihin myös kohdasta  >  >  > 

- 2 Selaa tallennettuja tietoja nuolinäppäimillä  

Symbolien selitykset



Kulmassa näkyvä numero on päivämäärä. Esimerkeissä on annettu mahdollinen kalenterinäköymä.

-  1 Matala hedelmällisyys edellisessä kierrossa
-  28 Korkea hedelmällisyys edellisessä kierrossa
-  Huippuhedelmällisyys edellisessä kierrossa
-  14 Matala hedelmällisyys nykyisessä kierrossa
-  21 Korkea hedelmällisyys nykyisessä kierrossa
-  Huippuhedelmällisyys nykyisessä kierrossa
-  21 Monitori pyytää hedelmällisyydestä

-  5 Musta reuna osoittaa nykyisen päivämäärän
-  6 Päivämäärä tulevaisuudessa
-  Hedelmällisyydestä pyydetty ja se on tehty
-  Hedelmällisyydestä pyydetty, mutta sitä ei ole tehty
-  Vuototiedot tallennettu
-  Yhdyntä tallennettu Jos vuototiedot on tallennettu, sydän on valkoinen

-  Kierron tiivistelmä
-  Aloita uusi kierto (päivä 1)
-  Raskaana
-  Ei raskaana

Kalenterin tallennustiedot

Monitoriin voidaan tallentaa ylimääräiset tiedot, joihin pääsee kalenterinäytöstä. Monitori ei analysoi tätä, eikä se vaikuta raskaus- tai hedelmällisyydestin tuloksiin.

1 Pääset tietoihin painamalla  > 

Pääset tietoihin myös kohdasta  >  >  > 

2 Paina sitä päivää, jonka kohdalle haluat syöttää tiedot (et voi syöttää tietoja tulevaisuuteen)

Jos haluat siirtyä toisen kuukauden kohdalle, käytä nuolia



Painamalla tästä
saat lisää tietoa.


Yhdyntä

Kuukautiset

Selaa päiviä nuolinäppäimillä.

Painamalla tästä ilmoitat, että
yhdyntä on tapahtunut tänään.

Tallenna vuototiedot painamalla tästä
- vähäinen, keskirunsas tai runsas

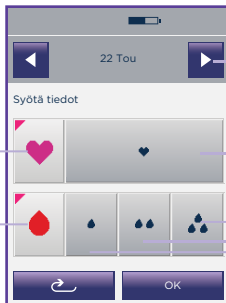

3 Paina OK.

4 Kalenteri päivitetään asiaankuuluvalla symbolilla.


Kierron tiivistelmä

Kierron tiivistelmätaulukko antaa tietoa 6 aikaisemmasta kierrosta (tai alle kuudesta, jos 6 kiertoa ei ole vielä täynnä), joista -1 on tuorein ja -6 vanhin. Tätä tietoa saatetaan tarvita, jotta sinä ja lääkärisi ymmärrätte kierron kaavan. Kierron tiivistelmä on käytössä heti ensimmäisen kuukautiskierron jälkeen.

- 1 Siirry kohtaan  >  > 

Pääset tietoihin myös kohdasta  >  > 

- 2 Kierron tiivistelmän ymmärtäminen

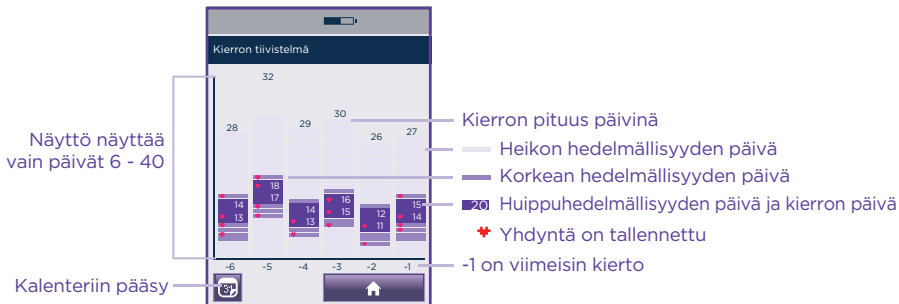

Asetukset

- 1 Selaa asetuksia painamalla  >  .
Säädä asetuksia



Kirkkaus

Kirkkauden vähentäminen voi säästää paristojen käyttöikää.



Aika

Jos kiertoa ei ole asetettu, voit muuttaa aikaa rajoituksetta. Voit muuttaa aikaa aina päivään 4 asti, kun kierto on asetettu. Päivien 1 ja 4 välillä voit vaihtaa aikaa vain +/- 1 tunti, ja voit tehdä sen vain kerran kunkin kierron aikana. Jos muutat aikaa, testi-ikkuna päivitetään automaattisesti. Katso kysymys 15.



Kieli

Valitse kieli.



Uudelleenohjelmointi

Uudelleenohjelmointi tyhjentää kaikki tallennetut tiedot, mukaan lukien kierron tiivistelmä ja kalenteritiedot, eikä niitä voi palauttaa.

Ohjelmoi uudelleen painamalla:  >  > 

Vahvista painamalla Kyllä ja OK. Ennen kuin aloitat monitorin käytön, tarkista, että se sopii sinulle (katso sivu 3) ja tee sitten monitorin asetukset (katso sivu 8).



PIN

PIN-koodin asetus, muutos tai kytkeminen pois päältä.



Kalibrointi

Jos näyttö ei reagoi normaaliin tapaan, se pitää kalibroida uudelleen.

Paristojen tiedot

On tärkeää, että käytät kahta 1,5 V:n AA-alkaliparistoa (LR6). Jos et tee näin, monitori ei välttämättä toimi oikein. **Älä** käytä uudelleenladattavia paristoja. Vaihda paristot heti pyydettyäessä, ettet menetä monitoriin tallennettuja tietoja. Jos paristot ovat erittäin vähissä, monitori sammuu tietojen säästämiseksi. Tällöin paristot on vaihdettava ennen jatkamista.

Jos et vaihda paristoja pyydettyäessä, monitorissa ei riitä virta, ja se on ohjelmoitava uudelleen. Uudelleenohjelmointi poistaa kaikki tallennetut tiedot.


Jos monitori on ilman virtaa liian kauan, se saattaa ohjelmoitua automaattisesti uudelleen. Kun vaihdat paristot, esiin tulee näyttö, joka pyytää valitsemaan kielen.

Kun olet valmis vaihtamaan paristot, **sammuta monitori** ja poista vanhat paristot paristoliuskujen avulla **ottamalla ensin ulos niiden negatiiviset päät**. Älä poista paristoja terävän työkalun avulla.

Aseta uudet paristot sivun 8 ohjeiden mukaisesti.


Kytke monitori takaisin päälle, jotta se voi tehdä tarvittavat tarkistukset.

Katso kysymyksestä 23 lisätietoja paristojen hävittämisestä.

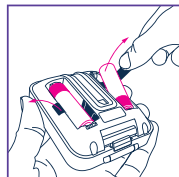


Testiaukon puhdistaminen

- 1 Irrota paristokansi.
- 2 Paikanna ja työnnä ulos testikelkka.
- 3 Kostuta puhdas vanupuikko kylmään veteen ja puhdista testiaukko ja testikelkka varovasti.
- 4 Työnnä testikelkka takaisin.
- 5 Kiinnitä paristokansi.

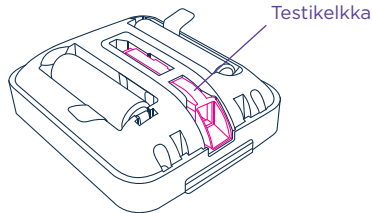

Hedelmällisyystestivirheet

Jos monitori kaipaa huomiota tai siinä on ongelma, näytölle tulee lisätietoa.

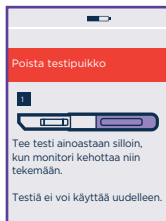**1**

Monitori ei ole kehottanut tekemään testiä. Poista testipuuikko ja tee testi ainoastaan silloin, kun monitori kehottaa niin tekemään.


Tee testi ainoastaan silloin, kun monitori kehottaa niin tekemään.

Testiä ei voi käyttää uudelleen.

**2**

Poista testipuuikko monitorista.

Monitoriin on jätetty testipuuikko.

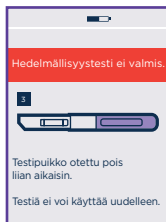**3**

Testipuuikko otettu pois liian aikaisin.

Voit testata uudelleen uuden testi-ikkunan aikana, mutta vältä liiallista juomista ja odota, että olet mahdollisimman lähellä testi-ikkunan loppua. Voit myös odottaa ja testata seuraavana päivänä testi-ikkunan aikana. Muista odottaa, että testi on valmis ennen testin poistamista. Katso sivu 12.

Testipuuikko otettu pois liian aikaisin.

Testiä ei voi käyttää uudelleen.

**7**

Testin aikana on tapahtunut virhe. Syy voi olla seuraava:

- Et pitänyt näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai asettanut testiä vaakatasoon testauksen jälkeen.
- Virtsa oli liikaa tai liian vähän.


Voit testata uudelleen uuden testi-ikkunan aikana, mutta vältä liiallista juomista ja odota, että olet mahdollisimman lähellä testi-ikkunan loppua. Voit myös odottaa ja testata seuraavana päivänä testi-ikkunan aikana. Katso sivu 12.

Testin aikana on tapahtunut virhe.

Tutustu käyttöohjeisiin.


Raskaustestivirheet

Jos raskaustestin aikana on tapahtunut virhe, jokin seuraavista näytöistä voi tulla näkyviin:

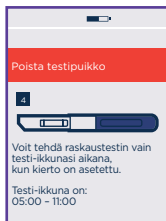

4

Olet testannut testi-ikkunan ulkopuolella. Testiä ei voi käyttää uudelleen. Odota, että testi-ikkuna alkaa ja testaa uudella testillä.

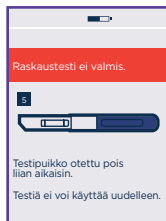

5

Testipuiikko otettu pois liian aikaisin. Monitori ei pysty näyttämään testin tulosta. Katso sivu 17.




6

Testin aikana on tapahtunut virhe. Syy voi olla jokin seuraavista:

- Et pitänyt näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai asettanut testiä vaakatasoon testauksen jälkeen.
- Virtsa oli liikaa tai liian vähän.
- Olet jo tehnyt raskaustestin tämän testi-ikkunan aikana.

Katso lisätietoja sivulta 17.

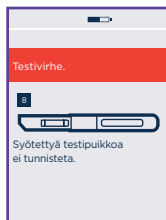


8

Olet käyttänyt testiä, jota monitori ei tunnista. Tee testi uudelleen ja varmista, että käytät Clearblue Advanced -hedelmällisyydestestiä tai -raskaustestiä.


Muut viestit ja virheet

Viestipalkki on korostettu punaisella.


Jos syötät väärät tiedot tai et syötä tietoja mutta painat OK, tietopalkki muuttuu punaiseksi virheen merkeksi. Syötä oikeat tiedot.

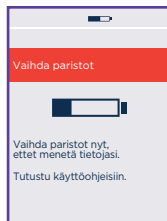


Paristot ovat vähissä, ja ne on vaihdettava. Jos vaihdat ne myöhässä, voi käydä niin että paristoissa ei ole riittävästi virtaa ja saatat menettää tiedot. Sammuta monitori ja irrota paristot vasta sitten, kun olet vaihtamassa tilalle uusia. Kun olet asettanut uudet paristot, käynnistä monitori, jotta se voi tehdä tarvittavat tarkastukset.

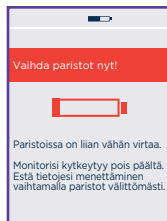

Paristot on vaihdettava ennen testin tekemistä. Monitori sammuu itsestään tallennettujen tietojen suojelemiseksi. Älä poista paristoja ennen kuin olet vaihtamassa niitä uusiin. Kun olet asettanut uudet paristot, käynnistä monitori, jotta se voi tehdä tarvittavat tarkastukset.

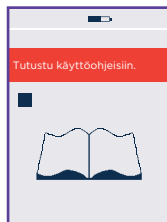

Tämä tarkoittaa ongelmia monitorissa. Näytöllä näkyy myös numero. Soita asiakaspalveluun. Ilmoita ongelmasta ja kerro, mikä numero näkyy näytöllä.

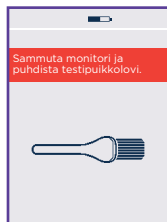

Testiaukko on puhdistettava ennen testin työntämistä paikalleen. Katso sivu 24. Tämä saattaa tulla näkyviin myös, jos testi on työnnetty paikalleen väärin. Katso sivu 13.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Monitorin käyttö ja hedelmällisyyden testaus/tulokset

1 Haittaako, jos kiertoni pituus vaihtelee kierrosta toiseen?

Jos kierron pituus on silti 21 - 42 päivää, sen vaihtelu kierrosta toiseen ei haittaa.

Jos kierron pituus on näiden päivien ulkopuolella, et ehkä havaitse hedelmällisiä päiviä.

2 Unohdin asettaa uuden kierron sinä päivänä, kun kuukautiset alkoivat. Mitä minun pitäisi tehdä?

Uusi kierto on asetettava päivien 1 ja 4 välillä jokaisessa kierrossa.

Aseta uusi kierto painamalla  >  >  . Sivulla 9 kerrotaan, kuinka uusi kierto asetetaan.

Jos et ole asettanut uutta kiertoa päivään 4 mennessä, odota seuraavien kuukautisten alkamista ja aseta uusi kierto silloin.

3 Luulin kuukautisteni alkaneen ja asetin uuden kierron, mutta se olikin vain tiputtelua. Mitä minun pitäisi tehdä?

Paina valikosta  >  >  ja poista kierto ohjeiden mukaan. Uusi kierto on poistettava päivien 1 - 4 aikana. Kun kuukautiset alkavat, aseta uusi kierto.

4 Miten toimin, jos kierto on poistettava 4. päivän jälkeen?

Et voi poistaa kiertoa 4. päivän jälkeen. Jatka testaamista monitorin ohjeiden mukaan, vaikka tällä kierrolla se ei ehkä tunnista hedelmällisiä päiviä. Aseta uusi kierto, kun kuukautiset alkavat. Katso sivu 9.

5 Mitä teen, jos minun pitää käydä vessassa ennen testi-ikkunan alkamista?

Käytä aina aamuvirtsaa heti herättyäsi. Jos et tee testiä heti, ota aamuvirtsat talteen. Katso sivu 13.

6 Monitorini näyttää yli 10 korkeaa päivää tai enemmän korkeita päiviä kuin odotin. Mikä tähän on syynä?

Kun monitori havaitsee nousua estrogeenitasossa, se antaa tulokseksi Korkea. Monitori etsii LH-huippua seuraavina päivinä. Se näyttää edelleen korkeaa, kunnes LH-huippu havaitaan ja huippu tulee näkyviin.

Jos LH-huippua ei havaita ja näyttö ei näytä huippua, saatat nähdä useamman korkean päivän kuin odotit. Niitä saattaa olla jopa 19. Jos näin tapahtuu, on epätodennäköistä, että olet hedelmällisimmilläsi koko tämän ajan.

On tärkeää jatkaa testaamista monitorin pyytämällä tavalla.

7 Monitorini ei näyttänyt huippua tälle kierrolle. Mikä tähän on syynä?

Jos huippua ei näy, siihen on olemassa useita mahdollisia syitä. Esimerkiksi LH-huippu on voinut olla liian alhainen, jotta monitori olisi voinut havaita sen, testi jäi tekemättä, se on tehty väärin tai ovulaatiota ei tapahtunut tällä kierrolla. Epätavallisen lyhyt tai pitkä kierto saattaa myös tarkoittaa sitä, että huippua ei nähdä.

On tärkeää tehdä testi, kun monitori niin pyytää. Jos huippua ei kuitenkaan havaita 3 perättäisen kierron aikana, käy lääkärissä.

8 Monitorini näytti matalaa tasoa koko kierron ajan. Mikä tähän on syynä?

Monitori ei havainnut muutoksia estrogeeni- tai LH-tasossa tämän kierron aikana. Siihen on useita mahdollisia syitä, esim. testi on voinut jäädä väliin tai se on tehty väärin tai ovulaatiota ei tapahtunut tällä kierrolla. Voi myös olla, että et asettanut uutta kiertoa. Muista, että uusi kierto on asetettava aina, kun kuukautiset alkavat, jotta monitori tietää, että uusi kierto on aloitettu.

Jos saat tulokseksi ainoastaan matalan hedelmällisyyden kolmen kierron ajan, ota yhteyttä lääkäriin.

9 Monitorini arvot muuttuivat matalista suoraan huippuun. Mikä tähän on syynä?

Näin saattaa joskus käydä esim. jos estrogeenin määrää ei havaita ennen LH-huippua, jos testi on jäänyt väliin, yksi tai useampi testi on tehty väärin tai jos sinulla on lyhyt kierto pitkän kierron jälkeen.

10 Olen unohtanut PIN-koodini. Mitä minun pitäisi tehdä?

Voit yrittää syöttää sitä kaksi kertaa. Jos syötät PIN-koodin väärin kaksi kertaa, monitori lukitsee itsensä ja sammuu. Monitori avataan käynnistämällä se uudelleen ja syöttämällä PIN-koodiksi 0000. Vaihda PIN-koodi näytön ohjeita noudattaen.

11 Mitä tapahtuu, jos herään myöhään tai unohdan tehdä testin testi-ikkunan aikana?

Jos et tee testiä testi-ikkunan aikana, monitori näyttää, että testi on jäänyt väliin. Se laskee hedelmällisyystilanteen siihen tallentuneiden tietojen perusteella. Jos testi kuitenkin on jäänyt väliin lähellä ovulaatiota, saatat menettää tilaisuuden tunnistaa huipun. On siis tärkeää muistaa testata aina, kun monitori sitä pyytää.

12 Onko monitori vedenpitävä?

Monitori ei ole vedenpitävä, eikä sitä saa kastella. Pyyhi ylimääräinen virtsa aina pois testipuikosta ennen sen työntämistä testiaukkoon.

13 Voivatko monitoriin tallennetut tiedot hävitä?

Monitori tarvitsee koko ajan paristojen virtaa. On erittäin tärkeää, että vaihdat paristot monitorin niin kehottaessa.

Jos paristot ovat loppumassa, monitori sammuu tietojen suojaamiseksi. Jos paristoja ei vaihdeta saman tien ja monitori jää ilman virtaa, tapahtuu virhe ja tiedot menetetään. Monitoria voi käyttää vasta, kun paristot on vaihdettu ja monitori ohjelmoitu uudelleen.

14 Millaisia paristoja tulee käyttää?

On tärkeää, että käytät 1,5 V:n AA-alkaliparistoja (LR6). Jos et tee näin, monitoriin tallennetut tiedot voivat hävitä. **Älä** käytä uudelleenladattavia paristoja.

15 Mitä teen, jos olen matkalla ja aikavyöhyke vaihtuu?

Ota monitori mukaan käsimatkatavaroihin. Röntgensäteet eivät vahingoita monitoria.

Monitorin aika on suositeltavaa vaihtaa vain kesäaikaan siirryttäessä. Katso sivu 23.

Jos matkustat aikavyöhykkeiden välillä, joiden aikaero on enintään 6 tuntia, voit edelleen testata testi-ikkunassa, jos se on asetettu niin, että voit käyttää aamuvirtsaa uudella aikavyöhykkeellä. Voit halutessasi asettaa muistutuksen, kun testi-ikkuna alkaa, mutta muista, että monitorin aika on oman aikavyöhykkeesi mukainen.

Jos matkustat aikavyöhykkeiden välillä, joiden ero on yli 6 tuntia, voit asettaa testi-ikkunan kotimaan aikavyöhykkeen (monitorin ajan) mukaan tai kohdemaan ajan mukaan. Se tarkoittaa ehkä päivän ensimmäisen virtsanäytteen keräämistä ja testaamista myöhemmin, kun testi-ikkuna alkaa. Voit myös jättää testit väliin sillä kierrolla, jonka olet matkoilla. Katso kysymys 11.

16 Mitä tapahtuu, jos teen vuorotyötä?

Kun asetat uuden kierron, aseta testi-ikkuna niin, että voit testata päivän ensimmäisestä virtsasta heti, kun heräät. Jos teet yövuoroja, tämä saattaa osua iltapäivään. Jos vuorosi vaihtuu kierron aikana, voit testata vain testi-ikkunassa, mutta sinun tulee edelleen käyttää ensimmäistä virtsaa pisimmän unijakson jälkeen. Se saattaa tarkoittaa virtsanäytteen keräämistä ja testaamista myöhemmin testi-ikkunassa.

17 Jos monitorini lakkaa toimimasta, mitä pitää tehdä?

Soita Careline-palvelunumeroon.

18 Kosketusnäyttö ei näytä toimivan. Painikkeet eivät vastaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Näyttö pitää ehkä kalibroida uudelleen, jotta monitori voi tarkistaa painikkeiden sijainnin.

Paina  asetuksista ja noudata näytön ohjeita.

19 Voinko lopettaa Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitorin käytön ja ottaa sen taas käyttöön myöhemmin?

Voit keskeyttää monitorin käytön yhden kierron ajaksi asettamalla uuden kierron normaalisti ja ohittamalla sitten kaikki testit, joita monitori pyytää sen kierron aikana.

Jos haluat keskeyttää monitorin käytön yhtä kiertoa pidemmäksi ajaksi, poista paristot ja varastoi monitori ja paristot kuivaan paikkaan. Kun haluat ottaa monitorin uudelleen käyttöön, sen asetukset on tehtävä uudestaan ja uusi kierto on asetettava seuraavien kuukautisten alkaessa. Paristojen poistaminen tarkoittaa sitä, että monitori uudelleenohjelmoi itsensä, joten kaikki tallennetut tiedot poistetaan.

20 Voinko olla varma raskaaksi tulosta, jos käytän Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria?

Mikään saatavilla oleva tuote ei voi taata raskauden alkamista. Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori tunnistaa yleensä 6 hedelmällisintä päivää eli päivät ennen ovulaatiota ja sen aikana. Yhdyntä näiden päivien (korkea ja huippu) aikana maksimoi mahdollisuudet tulla raskaaksi.

21 Olen käyttänyt Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria useita kuukausia, mutta en ole raskaana. Onko jokin vialla?

Raskauden alkuun saaminen voi tavallisilla terveillä pariskunnilla kestää useita kuukausia. Jos olet alle 35-vuotias ja olet yrittänyt tulla raskaaksi 12 kuukautta, kannattaa käydä lääkärissä. Jos olet yli 35-vuotias, lääkärissä kannattaa käydä kuuden kuukauden yrittämisen jälkeen, ja jos olet yli 40-vuotias, käy lääkärissä heti kun alat yrittää raskautta.

22 Voinko antaa jonkun muun käyttää monitoriani?

Et. Monitori tulkitsee ja tallentaa tiedot sinun kuukautiskiertosi mukaan, eikä sitä voi antaa kenenkään muun käyttöön. Monitorin lainaamista ei suositella myöskään hygieniasyistä.

23 Kuinka monitori ja paristot hävitetään?

Jos haluat poistaa monitorin käytöstä, noudata voimassa olevia sähkölaitteita koskevia kierrätysohjeita. Älä hävitä sähkölaitteita polttamalla.

Hävitä paristot asianmukaisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Varoitus: Älä pura tai lataa paristoja. Älä hävitä paristoja polttamalla. Ei saa niellä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Kysymyksiä ja vastauksia: Raskaustestin tekeminen ja tulokset

24 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa raskaustestin tulokseen?

- Lue aina käyttämiesi lääkkeiden käyttöohjeet ennen testin tekemistä.
- HCG-hormonia sisältävä hedelmällisyyslääkitys saattaa vääristää tuloksia (tällainen hedelmällisyyslääkitys annetaan yleensä pistoksena, ja testaaminen liian pian lääkkeen saamisen jälkeen voi antaa virheellisen Raskaana-tuloksen).
- Muiden hedelmällisyyshoitojen, särkylääkkeiden ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (kuten ehkäisytabletit) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.
- Jos olet vastikään lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai käytät hedelmällisyyshoitoja, kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, jolloin saatat testata liian aikaisin.

- Jos olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti), voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen.
- Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakystat, vaihdevuodet ja tietyt hyvin harvinaiset sairaudet voivat vääristää tuloksia.
- Jos saat Raskaana-tuloksen, on mahdollista, että myöhemmin toteat, että et ole raskaana, mikä johtuu raskauden luonnollisesta keskeytymisestä, jota voi esiintyä raskauden alkuvaiheessa.

Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

Nämä tiedot koskevat vain raskaustestin tuloksia. Katso sivu 3 ja tarkista, mitkä lääkkeet tai sairaudet vaikuttavat hedelmällisyydestin tuloksiin.

25 Monitorin mukaan kuukautisteni pitäisi alkaa, mutta tiedän, että kiertoni ei ole 28 päivää. Voinko luottaa sen tietoihin?

Monitori antaa arvion siitä, koska kuukautisten odotetaan alkavan. Se käyttää saatavana olevia tietoja esim. huippupäivistä sekä edellisen kierron tietoja. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, se käyttää oletuksena 28 päivän kiertoa. Tiedot ovat vain arvioita. Jos tiedät, että kiertosi ei normaalisti ole 28 päivää, voit tehdä raskaustestin heti, kun kuukautisten mielestäsi pitäisi alkaa.

Jos teet testin ennen kuukautisten alkamista ja saat tulokseksi Ei raskaana, tee testi uudelleen 3 päivän kuluttua. Jos testin tulos on edelleenkin sama eivätkä kuukautiset ole alkaneet, käy lääkärissä.

Monitorin ja testien varastointi

Säilytä monitori kuivassa paikassa ja 10–40 °C:n lämpötilassa.

Säilytä testit kuivassa paikassa ja 2–30 °C:n lämpötilassa.



www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.

0800 774 150

Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa.

Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa.

Pidä tuote, pakkaus ja myös foliokääre käsillä kun soitat.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.

Clearblue on SPD:n tavaramerkki. ©2019 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön. Vain *in vitro* -diagnostiseen käyttöön.

Vain ulkoiseen käyttöön. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Monitori sisältää magneetteja.

	<i>In vitro</i> -diagnostinen lääketieteellinen laite		Eräkoodi		Valmistaja
	Lämpötilarajat 10–40 °C		Viimeinen käyttöpäivä		

0123



Tämä *in vitro* -diagnostinen digitaalinen laite täyttää standardin EN 61326-2-6 mukaiset säteilyä ja häiriönsietoa koskevat vaatimukset. Elektroninen laite on suunniteltu siten, että se antaa kohtuullisen suojan sellaisia sähkömagneettisia häiriöitä vastaan, joita kotiympäristöissä todennäköisesti ilmenee. Seuraavat ennakkovaraukset koskevat EN 61326-2-6 -standardin mukaisia laitteita.

a) Mikäli laitetta käytetään kuivassa ympäristössä ja erityisesti synteettisiä materiaaleja (kuten synteettisiä vaatteita tai mattoja) sisältävissä kuivissa ympäristöissä, seurauksena voi olla vahingollisia staattisia purkauksia, jotka saattavat aiheuttaa tulosten vääristymistä.

b) Laitetta ei saa käyttää voimakkaiden sähkömagneettisten säteilylähteiden (kuten matkapuhelinten) lähellä, sillä ne saattavat häiritä laitteen asianmukaista toimintaa.

